

## Sistemi za bezmetalnu keramiku

### Zirkonzahn „Pokreni svet svojim rukama“

Kopir frez aparat za manualnu izradu mostova od cirkonoksida (Yttrium stabilizovan cirkondioksid) ZIRKONZAHN je ponudio potpuno individualna rešenja u manualnoj tehnologiji frezovanja. Tasterom (opipivačem) prelazimo preko izmodelovanog objekta a freza istovremeno struže iz cirkon bloka uvećanu konstrukciju. Područje rada je osvetljeno LED lampicama ugrađenim u alate. Ceo frez aparat je kružno pokretljiv što omogućava odličnu preglednost tokom rada.

### Vašu tehniku frezovanja možete bukvalno dovesti do savršenstva!

Mikro freze frezuju najsitnije detalje, a veliki izbor freza rešava svaki tehnički izazov ili problem. Specijalni alati omogućavaju frezovanje različitih abatmena. Zamena freza je jednostavna i brza. Sa jednom frezom je moguće isfrezovati i do 100 elemenata, a za frezovanje i modelovanje jednog elementa Vam je potrebno samo 10 minuta. Dvo-kanalni priključak na vazduh štiti unutrašnjost aparata od prašine i čisti objekat koji se frezuje. Na sistem je moguće priključiti Zirkonzahn aspirator.

## Zirkograph 025 ECO „Frezer za narod“

**Br.Art.**            **Artikal**


025ECO            ZIRKOGRAPH

Teh.podaci: 59x25x57cm(h), 21kg, 190W

„Frezer za narod“ izrađuje mostove svih veličina, pa sve do implantata. Sve vrste preparacija su moguće.

POPUST:

Samo 3.974 € -ukoliko se odlučite i za ZIRKONZAHN peć za sinterovanje

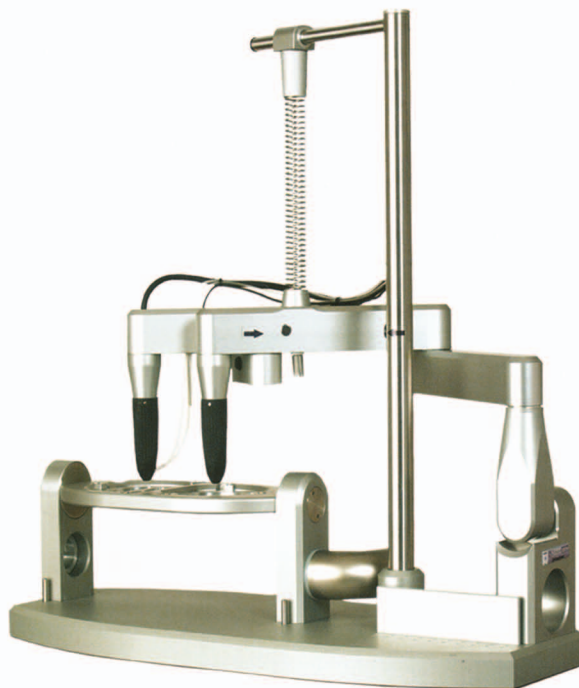


## Zirkograph 025

**Br.Art.**            **Artikal**

025                ZIRKOGRAPH

Teh.podaci:

Izrada mostova od 1-16 članova  
92x35x106cm(h), 39kg, 190W

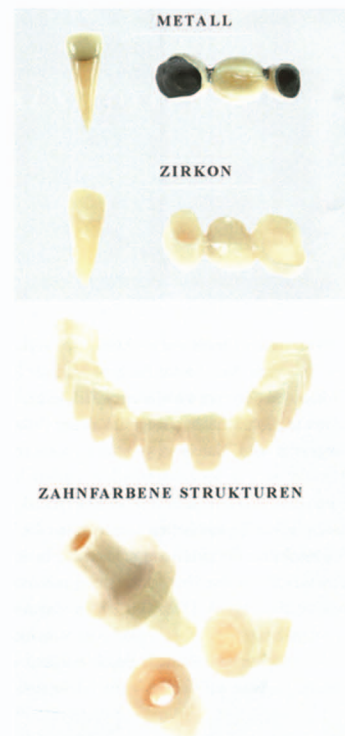



### Peć za sinterovanje „Zirkonofen 600“

Br.Art.	Artikal	
ZO600	ZIRKONOFEN	3.974,00€


Teh.podaci:  
29x61x48cm(h), 45kg, 700W, 0,6l, maks.temp. 1600°C  
Mogućnost instalacije do 5 programa

### Peć za sinterovanje „Keramikofen 1500“

Br.Art.	Artikal	
KO1500	KERAMIKOFEN	7.800,00€

Teh.podaci:  
26+36x54x44cm(h), 73kg, 900W, 1,7l,  
maks.temp. 1600°C  
Mogućnost instalacije do 5 programa. Komora i kontrolna jedinica su zasebni. Sinterovanje moguće na dva različita stupnja. Rad se stavlja na klizajuću platformu.

Mogućnost instalacije do 5 programa

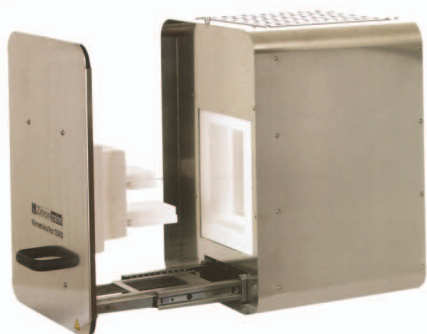

### Infracrvena lampa »Zirkonlampe«

Br.Art.	Artikal	
SY0070	Infrared lampa	219€

- za sušenje cirkona



### Lampa za polimerizaciju Quick Lamp

Br.Art.	Artikal	
ZBAA1301	POL.Lampa	690,00€

-za svetlodnu polimerizaciju, radi na senzor



### ZIRKONZAHN CIRKON BLOKOVI CIRKONOKSID - ZA MODERNU ZUBNU NADOKNADU

Za više informacija potražite u Mikodontalu ZIRKONZAHN KATALOG!!!