

## FOCUS PEĆI

### VISOKE PERFORMANSE PO RAZUMNOJ CENI

FOCUS linija peći predstavlja u industriji peći za keramiku vodeći standard, jer je poznata po svojoj preciznosti i isplativosti. Lako rukovanje displejom i jednostavno programiranje čine ove peći veoma atraktivnim. Brzi programi sa logičnim displejom pružaju totalnu kontrolu tokom celog procesa pečenja.

- PRE-DRYING (UP TIME)- vreme podizanja lifta u pet kontrolisanih stupnjeva
- PRE HEATING (DRY TIME)- startna temperatura nakon zatvaranja, sa ili bez vakuuma.
- PEČENJE- precizno upravljanje temperatura do 1200°C, sa porastom od 10-120°C/min, obezbeđuje konstantne, predvidljive rezultate.
- SPORO ILI BRZO HLAĐENJE- kontrolisano
- PROCES TEMPIRANJA- individualno podesivi parametri -FINALNA temperatura i odlaganje, pomažu u podešavanju pravih parametara, za keramiku i metal.
- HOLD/RELEASE mode- manuelno stopiranje ili produžetak bilo koje faze
- MANUEL OVERRIDE- parametri se mogu menjati u svako doba, čak i tokom pečenja!
- ODLAGANJE- programirati odlaganje i tokom pečenja
- FULL CONTROL- podešavanje vakuuma u svakoj fazi pečenja.

### FOCUS 2007 i 2008- tehničke karakteristike

- 100 programa ( 30 podešenih, 70 po izboru)
- automatski noćni modus, temperaturna i vakuum kalibracija
- na displeju jasan prikaz programa i podataka, °C ili °F
- mogućnost priključka štampača
- prozor za grejač

**THERMO TRAY-** metalni nosač u obliku saća pruža jednako pečenje svake krune i mosta!

### Opcija za FOCUS 2008:

- 100 programa, 5 podešenih, 95 podesivih
- Nova komora ( visoko precizna, kraće vreme pečenja,brzo hlađenje, perfektni rezultati, mnogo veća produktivnost).

### Tehničke karakteristike:

Dimenzije: 30x33x59cm(h), 22kg, 115/230V; 50/60Hz, 1500W/1800W  
Maks.temp. 1200°C, 10°C-120°C/min, dimenzije nosača: 90mm.

IEC CERTIFIKAT

## SHENPAZ MIKROMAT

Nakon 15 godina na našem tržištu i dobro poznatog programa peći: PANAMAT, FOCUS, GEMINI- Nova automatska peć za keramiku firme SHENPAZ sa novo konstruisanim grejačem, sa kvarc spiralom!

230V/50HZ



Vakuumpumpa DRY

## WOL-TEMP 1200

peć za sinterovanje

Specijalno konstruisana i razvijena visokokvalitetna peć za sinterovanje, male potrošnje, za svakodnevnu upotrebu.

- brzo zagrevanje i hlađenje
  - mala i kompaktna
  - jednostavna upotreba
- 230V/50HZ

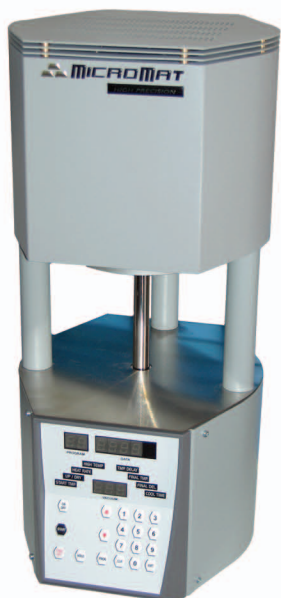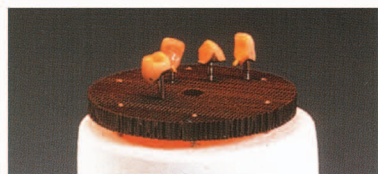

### Br.Art.    Artikal

F100	Fokus
M100	Makromat
P100	Peć za sinterovanje