

WOL-CERAM® ONE

"Uzmite budućnost u Vaše ruke"

WOL-CERAM®

Garantuje SAMOSTALNOST, da radite bez konkurencije, isplativo i precizno.

Br.Art.

Artikal

WONE

WOLC ONE ELC/ELM/R



WOL-CERAM® ONE – faktori kvaliteta za uspeh
Mnogostranost:

"WOL-CERAM® ONE" sistem pruža mogućnost povoljne izrade bezmetalnih keramičkih mostova i kruna sa najvišom preciznošću.

Postojanost:

Kliničke studije pokazuju uspeh od 98,9% nakon šest godina, stabilnost kao metal-keramika.
Cementiranje po izboru: Stomatolog radi kao i uvek.

Nema dubliranja:

Radi se na original patrljku.

WOLCERAM=odlično prijanjanje.

Tehnika čipova za mostove:

homogeni mostovi nastaju direktno u keramičkoj suspenziji, u jednom radnom potezu, za samo nekoliko minuta.

Elektroforeza:

Nanos rastvora (alumina ili cirkon) putem struje (postupak elektroforeze,u samo nekoliko sekundi garantuje savršenu mikrostrukturu i homogenost.

Tehnički podaci

- 2 osovine

- Elektrolit-stanica, stanica za sušenje, stanica za nanos tečne keramike.

Dimenzije: 38 x 38 x 47 cm

Priključak: 230 V AC / < 3 A


Temp.radne okoline:15°C-30°C




Krone



Mostovi

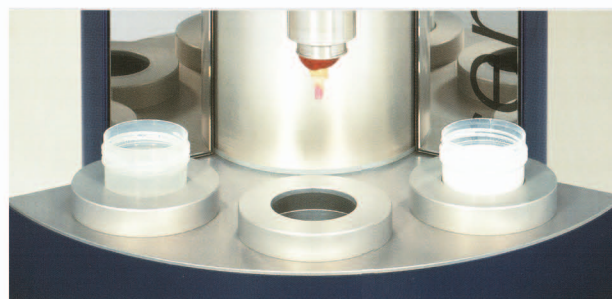

Radi se na original patrljku

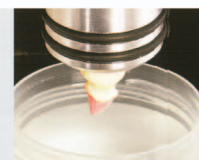

Umakanje u elektrolit



Umakanje u suspenziju



Nanos rastvora



Glas-infiltracija

WOL-CERAM® ELC CAD / CAM 2020

Rešenje za centar

- Elektroforetički CAD/CAM sistem
- Krune, mostove, implantate, abatmene, nadogradnje....i više
- Proizvodi samostalno 5 jedinica za redom
- Proizvodi čak 80 jedinica dnevno!
- automatski i manuelno upravljanje
- Konstruisan za proširenje



CAD/CAM proces

CAD/CAM sistem se sastoji od integrisanog lasera i jedinice za frezovanje. Koristi proces elektroforeze za nanos keramike i lasersku tehnologiju za skeniranje preparacije ili implantata. Podaci se obrađuju i prikazuju na 3D ekranu. Sledi proces elektroforetičkog nanosa suspenzije i frezovanje. Potom eksterno sinterovanje i glasinfiltracija.

“WOL-CERAM” daje najbolje rezultate : perfekcija cervikalnog prijanjanja, stabilnost metal keramike, neutralan na preparacije, pogodan za svako cementiranje, nezamenljiv u implantologiji, potpuna imitacija prirodnog zuba.

Oprema

- sa X,Y,Z rotirajućom osovinom
- laserski skener
- elektrolit kondicioniranje
- stanica za šliker
- stanica za sušenje
- stanica za frezovanje
- 5 magacina za proizvodnju nezavisnih jedinica

Specifični periferni aparati (1020 i 2020)

- mešalica za šliker
- peć sa sinterovanje i infiltraciju

Br.Art.

Artikal

2020
WT

WOLC 2020
WOL-TEMO PEĆ ZA SINTEROVANJE