



SHOFU JAPAN od 1922 LIDER U ESTETSKOJ STOMATOLOGIJI



Vrhunske estetske restauracije giomerom

Beautifil® II

Beautifil II je najpouzdaniji trajni, estetski ispun, indikovani za frontalnu i bočnu regiju kod dece i odraslih. Zasnovan na PRG tehnologiji otpuštajućih fluorida. (Pre-Reacted Glass-ionomer). Beautifil II obezbeđuje vrhunske estetske rezultate izvanrednim slaganjem boja, koje vrše transmisiju svetlosti kao prirodan zub. Tako nevidljive restauracije postaju moguće već u jednom sloju. Beautifil II poseduje sposobnost trajnog otpuštanja fluorida i pruža efikasnu i delotvornu zaštitu od sekundarnog karijesa. U kombinaciji sa odgovarajućim adhezivnim sistemom FL-Bond II, udvostručeno je preventivno dejstvo i uspostavljena je jaka adhezivna veza.

Top INFO: U SAD je Beautifil II-2007godine izabran od strane CRA u Top 10 stomatoloških proizvoda nakon objavljene kliničke studije od Gordan et al. 2007 i 8-godišnjeg kliničkog ispitivanja. Giomer proizvodi firme SHOFU pobudili su ogromno interesovanje u Evropi i stekli poverenje velikog broja stomatologa! Kliničku studiju dostavljamo po upitu!

Beautifil II 6 Color Set Sadržaj seta: 6 Beautifil špriceva (A2, A3, A3.5, B2, A30, Inc), po 4.5g, 1 Dura-White kamen (FL2), 1 Super-Snap single pak. (gumice za obradu i poliranje), 1 OneGloss trial set (3gumice), 2 x 5 kom. aplikatora, papirni blok. PN/šifra: 1775



Pre restauracije



Posle restauracije

Fotografije dr Sushil Koirala



Beautifil II Cosmetic Kit

Sadržaj seta:

3 Beautifil šprica (A2, A3, Inc) po 4.5g, 1 špric Beautifil Flow F02 A2, 2 g, 1 špric Beautifil Opaquer (LO), 2g, 1 Dura-White kamen (FL2), 1 Super-Snap single pak. (gumice za obradu i poliranje), 1 OneGloss trial set (3gumice), 2 x 5 kom. aplikatora, papirni blok. PN/šifra:1777



Beautifil Flow

Tečni Beautifil II u dva viskozitetu Beautifil Flow na idealan način proširuje spektar indikacija sistema Beautifil II - aplikaciju optimalnom tehnikom. Beautifil F02 ima veću viskoznost, a Beautifil Flow F10 je manje viskozan. U kombinaciji sa FL-Bond adhezivnim sistemom - u primeni je pouzdan i

siguran, visokokvalitetan sistem bogat fluoridima, kompetentan za sve estetske zahteve. Jednostavno aplikovanje. Visoka dugotrajnost i otpornost na vodu. Prima i otpušta fluore. Dobar rendgen opacitet, prirodna transmisija svetlosti.

Boje: A1, A2, A3, A3.5, A4, A30, A3T (translucant), G (Gum).



Beautifil II špricevi po 4,5g - A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, Inc, BW (za izbeljene zube), A20, A30 PN/šifra: 1401-1420



Beautifil Opaquer

Tečni oblik Beautifila - koristi se za prekrivanje diskoloracija, pigmentacija, kao i podloga kod devitalizovanih zuba. U ponudi je u bojama "Universal Opaque" i "Light Opaque" i već tanak sloj je visoko pokrivan i pouzdan. Po 2 gr.

Universal opaker PN/šifra: 1363; **Light opaker:** PN/šifra: 1364.

HiLite®

Dual aktivni sistem za beljenje vitalnih i avitalnih zuba - dizajniran za brzo vidljive rezultate i upotrebu u ordinaciji. Sistem je veoma efikasan, upotreba jednostavna. Tretman uz svetlosnu polimerizaciju traje 2min, bez svetlosne polimerizacije 8min. Samo 1 do 2 tretmana su potrebna za postizanje željenog efekta. Ekonomičan set, namenjen za veliki broj aplikacija.



HiLite set: prah 5 g, tečnost 2 x 14 ml, plavi vazelin 15 ml, 1 merica, 1 blok za mešanje, 1 špatula, 1 četkica br. 4 sa 10 vrhova četkice. PN/šifra: 1269

BeautiBond

Jedna komponenta - brzo i efikasno. Svetlosno - polimerizujući, jednokomponentni, samojetkajući adheziv. Inovativna formula, pojednostavljena upotreba. BeautiBond je inovativni All-in-one adheziv, najnovije generacije. Na osnovu dva hydrolyse - stabilna monomera -BeautiBond pruža dugotrajnu i stabilnu vezu ka gleđi i dentinu. Ne sadrži hem, isključena je mogućnost prebojavanja gingive.

TOP INFO - Na 3rd Congress on Adheziv Dentistry 2008, u komparativnoj studiji, prof. Sano i Dr.Kawamoto sa Hokkaido univerziteta-Japan su poredili jačinu veze BeautiBonda u odnosu na slične adhezive 6 i 7 generacije. Interesantan rezultat - BeautiBond ima višestruko jaču dentin vezu u poredjenju sa sličnim jednokomponentnim adhezivima.

Novo



PN/šifra 1781, Beauti Bond , flašica 6 ml, 50 aplikatora, posuda za aplikaciju, 25 kom. **PN/šifra 3234** 5ml, Porcelain Primer

FL-Bond® II Etchant

Adhezivni sistem namenjen za gleđ.

FL-Bond Etchant sadrži samo 7% fosforne kiseline.

PN/šifra 1309

Količina 6 ml.



FL-Bond® II

Samojetkajući, fluorid otpuštajući adhezivni sistem zasnovan na PRG tehnologiji (Pre - Reacted Glass - ionomer). "Two-step" adhezivni sistem se odlikuje izvanrednim osobinama vezivanja za gleđ i dentin, što obezbeđuje sigurno rubno zatvaranje kaviteta. Prajmer ne sadrži HEM i aceton.

Postoperativna osetljivost i prebojavanje gingive je u potpunosti redukovana. **FL-Bond II** vezivni sistem kontinuirano pruža fluor zubnoj strukturi i obezbeđuje izvanrednu otpornost na abraziju. Aplikacija "Two-step" traje samo 35 sekundi, jer nema jetkanja, mešanja i kontrole vlažnosti. Ugodno rukovanje.

FL-Bond II set **PN/šifra 1306** Sadržaj seta: Primer 5 ml, Bond 5ml, Micro-četkice pink i žute, po 25 kom, 1 posuda sa poklopcem.

Novo




BeautyOrtho Bond®
Svetlosno polimerizujući, samojetkajući adheziv koji otpušta fluoride i preventivno deluje na mestima otežanog održavanja oralne higijene.

BeautyOrtho Bond je razvijen za jednostavno i brzo pričvršćenje ortodontskih bravica. Usled samo-kondicionirajućeg prajmera, jetkanje fosforom kiselinom nije potrebno. Upotreba je brza i sigurna. Bonding pasta sadrži PRG punjač i predstavlja depo fluorida. Pasta se stvrdnjava svetlosnom polimerizacijom i omogućava komforno fiksiranje bravica.

Inovativan oblik šprica olakšava aplikaciju. Ovaj sistem je baziran na „Debonding“ efektu - SHOFU dental je rešio pitanje sekundarnih oštećenja gledji kao posledice skidanja fiksnih ortodontskih aparata.

BeautyOrthoBond sadrži-pasta 2x3g, Salivatect 2g, primer A 3ml, primerB 3ml, aplikator za špic - 50kom., MicroBrushFine-četkice-2x2 5kom., posuda.
PN/šifra:1493

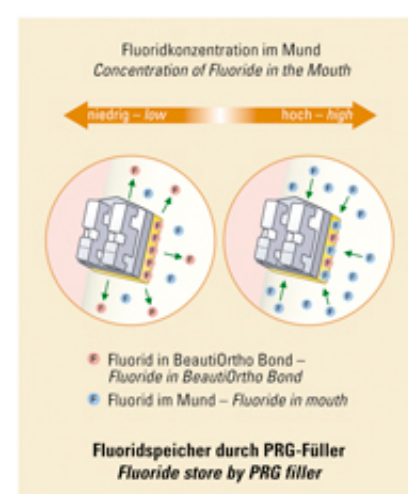

Fluoridi u BeautyOrtho Bond i ustima



HI-FI Glaslonomer

Estetski glaslonomer namenjen za frontalnu regiju. U ponudi u VITA*bojama, koje se mogu kombinovati: A1, A2, A3.5, B2, B3, B4 i C3 kao i CB (cervikalna braon) sa univerzalnom tečnošću.

Tečnost 10ml
PN/šifra 3140;
Prah: A1, A2, A3.5, B2, B3, C3, CB.
PN/šifra: 3141-3147.
Ekonomičan set, namenjen za veliki broj aplikacija.



Glaslonomer Cement Tip II

Restaurativni materijal za ispune kaviteta III klase, V klase, za mlečne zube, podloge i za cementne nadogradnje. Klinički dokazan - dostupan u četiri boje koje se mogu mešati: (univerzalna, žuta, siva, braon) u kombinaciji sa odgovarajućom tečnošću. Tečnost 8ml, PN/šifra: 1140; Prah PN/šifra: 1141-1144



HI-Dense

Idealna podloga za dugotrajne privremene ispune, kavitete I i II klase na mlečnim i stalnim zubima, kao i restauracije V klase stalnih zuba. Glaslonomer-struktura ojačana sferičnim česticama srebro-kalaj legure. PN/šifra: 3110 – HI Dense Dual Pack, prah 10g, tečnost 5ml. PN/šifra: 3111-prah; PN/šifra: 3112-tečnost.



CX-Plus

Radiokontrastni cement za cementiranje nadogradnji, kruna, mostova, inleja i ortopedskih bravica. PREDNOSTI-jednostavna upotreba, manje osetljiv na vlažnost pri početnom vezivanju, produženo vreme pripreme pracoeno brzim vezivanjem u ustima. PN/šifra:1166 - prah 35g, teč. 17ml.

TOP INFO:
Uz Resicem, specijalno za alumina i cirkonija keramiku je ravnjen AZ –Primer koji na bezmetalnom području postiže visoke vrednosti.



Odmah nakon cementiranja



2 min. nakon cementiranja

ResiCem®

Dual-stvrdnjavajući, univerzalni sistem za cementiranje, idealan za alumina i cirkonija keramiku.

Rendgen kontrastan, dual-stvrdnjavajući vezivni sistem sa samokondicionirajućim prajmerom A i B za adhezivno cementiranje indirektnih restauracija svih vrsta keramika, kompozita, plemenitih ili neplemenitih legura. Odlikuju ga izvanredne fizičke osobine, koje omogućavaju pouzdano cementiranje, jednostavnu upotrebu.

ResiCem je depo fluorida, jer sadrži PRG –Shofu patentirani punjač, koji obezbeđuje antikariogenu zaštitu. Proverite zašto je jedan od najtraženijih Shofu proizvoda! Dostupan u bojama: providnoj(clear) i slonovača (Ivory), idealan za sve estetske zahteve, pri apsolutnoj stabilnosti boje.

PN/šifra: 3220 ResiCem Basic set: ResiCem pasta „Clear“, auto-mixing, 2 x 5 ml, Primer A 3 ml, Primer B 2.5 ml, Microtip fine (1 drška, 50 vrhova), 20 kanila za mešanje, posuda za mešanje.



Novo



AZ-Primer

Za adhezivno vezivanje kod aluminijum i cirkonoksid keramike. AZ-Primer je ekskluzivno razvijen za moderne materijale poput cirkonoksida i aluminijumoksida i garantuje izvanredne vrednosti vezivanje između restauracije, vezivnog kompozita i strukture zuba. PN/šifra 3232 Količina 5 ml Proizvod AZ-Primer



ML-Primer

Dizajniran da trajno veže kompozit za sve vrste legura. Zasnovan na adhezivnim monomerima, ML Primer stvara postojanu vezu jednostavnim aplikovanjem. Izuzetno je otporan na uticaj vlage i temperaturna opterećenja.

Za sve reparature intra i extra-oralne. Mogućnost kombinacije sa CRB sistemom. Proizvod ML Primer PN/šifra 1740 Količina 5 ml



Porcelain Primer

Za adhezivno pričvršćenje sinterovane i press keramike, kao i indirektnih kompozita sa vezivnim materijalom kao npr. SHOFU ResiCem.

PN/šifra: 3234, 5ml.

CRB Cera Resin Bond

Za trajnu vezu svetlosno-polimerizujućih kompozita i samostvrdnjavajućih akrilata sa svim keramičkim materijalima za fasetiranje. Zbog jednostavne intra i extra oralne upotrebe Cera Resin Bond ima neograničene mogućnosti upotrebe u ordinaciji i tehnici. Brza upotreba, siguran vezivni sistem, jednostavnije reparature!


Mogućnost kombinovanja sa ML Primer-om. PN/šifra 1741 CRB set: CRB I 6 ml, CRB II 5 ml, MicroBrush-četkice žute i pink, po 25kom, 5 posuda za mešanje.





OneGloss®

Gumice su nezamenjive kod uklanjanja površinskih pigmentacija bez oštećenja zubne gleđi, poliranje gleđi nakon uklanjanja zubnog kamenca, završne obrade svih vrsta kompozitnih ispuna, kao i za poliranje svih fiksni nadoknada nakon definitivnog cementiranja. Sastoje se od visokokonzentriranog Al-oksida + silikona.

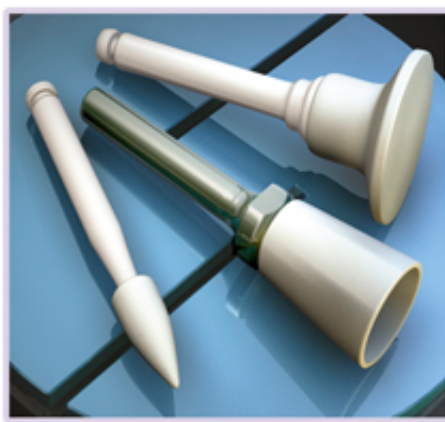

Dostupne i u pojedinačnim -refil pakovanjima.
PN/sifra-0180- One gloss set, 60 gumica, 3 mandrele ;
PN/sifra-0181,0182,0183-refil pakovanja;
PN/sifra-0435-mandrele.



Form	Kelch	Midispitze	IC	Minispitze	Mandrell
ISO-Nr.	060	060	100	030	
	0181	0182	0183	0186	0435



Composite Polishing Kit

Praktičan, višenamenski polir set za kompozite i keramiku. Set sadrži-2 Dura Green-abrazivna kamenčića, 2-Dura White kamenčića i 8 namenskih gumica za poliranje. PN/sifra: 0310



Composite Technique Kit

Višenamenski set za poliranje i finiranje svih kompozitnih ispuna i fiksni nadoknada.Veliki izbor oblika omogućava jednostavan rad i olakšan pristup u završnoj obradi. Set sadrži-2 Dura White kamena i 16 namenskih gumica za poliranje. PN/sifra: 0322



Super-Snap® sistem za poliranje

Nemontirani Super-Snap diskovi na jednostavan način konturiraju, finiraju i poliraju kompozite brzo i sigurno. Presvučeni diskovi imaju elastične nosače koji se jednostavno stavljaju na mandrelu. Disk ne sadrži metal, stoga ne postoji mogućnost slučajnog oštećenja ili prebojavanja kompozita. Ekstremno tanki diskovi su veoma fleksibilni, savijaju se pod pritiskom, bez pucanja i omogućavaju odličan pristup u aproksimalnu regiju.



Super -Snap uživa poverenje stomatologa širom sveta!

PN/sifra-0500: Super-Snap Rainbow Technique set: 180 diskova,40 tračica, 2 DuraWhite kamena, 1 CompositeFine gumic, 4 mandrele.
PN/sifra: 0505: Super Snap mini set: 48 diskova, 1 mandrela, 1CompositeFine gumica.



Super Snap® SuperBuff® Buff Mini Disk

SuperBuff disk je namenjen za poliranje direktnih i indirektnih kompozitnih restauracija do visokog sjaja. Disk je impregniran pastom i pre upotrebe ga treba jednostavno pokvasiti. Za jednokratnu upotrebu. Mandrele se mogu ponovo upotrebiti. Dostupan i u refil pakovanjima. PN/sifra: L523-L524



Merssage-Pressage Pasta

Paste za profilaksu su u ponudi u različitim verzijama (ukus menta, limun, narandža). Merssage pasta sadrži fluor, odstranjuje zubne naslage i polira do visokog sjaja. Pressage ne sadrži fluorida, preporučuje se za upotrebu pre beljenja i preventivnog zalivanja fisura. PN/sifra: 0572-0574




Dura-White® kamenčići za poliranje

Aluminijumoksid-kamenje tzv. „Arkanzas-kamenje“ je neprevaziđeno u finiranju zubne gleđi, kod preparacije patrljaka, kompozita, keramike i glasionomer cemenata. Dostupni u više veličina i oblika!



IZDVAJAMO:

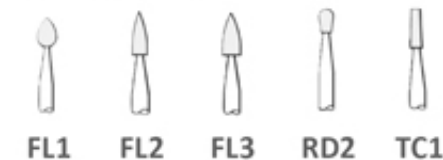

Direct Dia Pasta

Univerzalno upotrebljiva dijamantska pasta DirectDia pasta je namenjena za poliranje gleđi, kompozitnih ispuna i fiksni nadoknada do visokog sjaja. Sadrži 20% dijamantskih čestica veličine 2-4µm. Za intra i extra oralnu upotrebu. Zelene boje, dobro vidljiva u ustima pacijenta. Prijatnog limun ukusa, pakovana u špricima po 3g sa dozerom i aplikatorom. PN/sifra: 0558



Robot Points® FG Diamonds

Za minimalno invazivnu terapiju i jednostavan rad u ordinaciji

Robot Points su neophodni dijamanti za preparaciju u ordinaciji. Precizno kompjuterski nanosene dijamantske čestice, obezbeđuju dugotrajnost i vrhunski kvalitet. U poredjenju sa konvencionalnim dijamantima radni delovi su mali, a uzan i tanak vrat dozvoljava odličnu preglednost u toku rada.

Omogućavaju minimalno invazivnu terapiju sa maksimalnom poštedom supstance zuba i ciljanim uklanjanjem zubne supstance. Dostupni u pojedinačnim pakovanjima, po finoći zrnaste

strukture klasifikovani na ultra grube-crne, grube-zelene, standardne, fine-crvene i super fine-žute.


Für die minimalinvasive Therapie For minimally invasive therapy						
						
PN	0944-1	0945-1	0946-1	0947-1	0948-1	0949-1
ISO-No.	009	011	013	008	010	012



TPE Dijamanti (Tissue-Protective, End-Cutting)

Idealna završna obrada zahvaljujući TPE-setu dijamanta.


TPE-dijamanti, standardne dužine radnog dela-9,0mm-u 2 tipa zrnaste strukture - grubi i fini i kratkog radnog dela-6,0mm grube strukture, omogućavaju besprekornu završnu obradu stepenika! Gruba zrnasta struktura omogućava brzu obradu, fina (dijamanti označeni crvenim prstenom) definitivno poliranje i definisanje subgingivalnog stepenika. Kratki TPE dijamanti su idealni za preparaciju teško dostupnih mesta.
PN/šifra: 0688, 9 oblika.

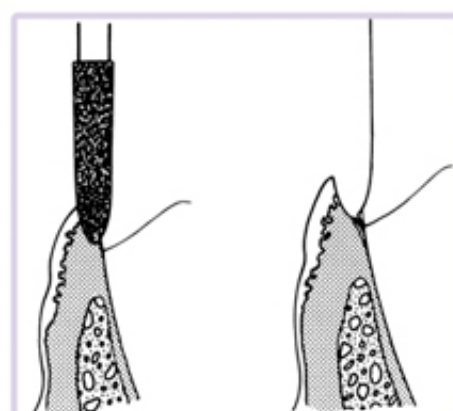

Gingi Curettage Dijamanti

Za olučaste preparacije kod kruna i mostova.

Sa Gingi Curettage dijamantima zlatne boje postizete optimalne uslove za precizno uzimanje otiska. Relativno grub, zlatni dijamant (170µ) ima nagib 3° i vrh zakrivljen ka osovini 45°. Radijus vrha iznosi 1,52mm.
PN/šifra: C200, 6 oblika

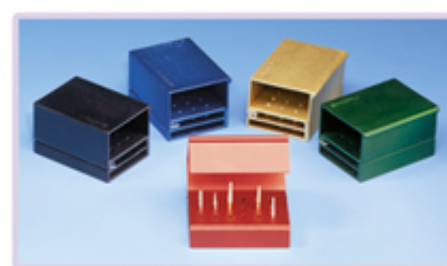

Bur Block • Bur Station II

Kutijice za odlaganje i sterilizaciju borera-6- kolenjak i 12 - turbina,dostupne u više boja, idealna zaštita i pouzdana sterilizacija produžava vek sitnih rotirajućih instrumenata.



All Ceramic Preparation Kit

Jedinstven set za savršene bezmetalne preparacije u frontalnoj, premolarnoj i molarnoj regiji, kao i inlej i preparacije faseta. Oblici dijamantskih borera su dizajnirani za preciznu i optimalnu preparaciju. Set sadrži 17 dijamanta, sa dužinom radnog dela od 3,5 do 9,0mm, preseka na vrhu od 1,1 do 2,0mm i suženja od 4° do 20°. Proverite kako sa All Ceramic-om brzo i jednostavno dolazite do savršene preparacije!
PN/šifra: 0955



CERAMAGE ® Mikro-keramički kompozit-sistem

Ovaj kompozit sistem sadrži više od 73% mikro-fine keramike i postavlja nove standarde svetlosno-polimerizujućih materijala za fasetiranje.

Homogena struktura daje CERAMAGE materijalu izvanredne fizičke osobine, za metal-keramiku, bezmetalnu keramiku, fasetirane restauracije u frontalnoj i bočnoj regiji. Svetlosno prelamanje i rasipanje je kao kod prirodnog dentina i gleđi. Veliki izbor setova i pojedinačnih komponenti!

Novo



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605 - 0983, Japan (www.shofu.co.jp)
SHOFU INC. Singapore Branch 10 Science Park Road, #03-12 The Alpha, Science Park II, Singapore 117684 (www.shofu.com.sg)
SHOFU DENTAL SUPPLIES (SHANGHAI) CO. LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industry Park, Songjiang 201602, Shanghai, China (www.shofu.com.cn)
SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059, USA (www.shofu.com)
SHOFU DENTAL PRODUCTS LTD. Dukes Factory, Chiddingstone Causeway, Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK (www.shofu.de)
SHOFU DENTAL GmbH [EC REP] Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany (www.shofu.de)
SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.
© Copyright 2001 SHOFU INC. All rights reserved.

GENERALNI ZASTUPNIK I DISTRIBUTER

IKODENTAL

Stojana Novakovića 19 * 15000 Šabac * Srbija * tel/fax: 015 345 123 * 015 300 261

www.mikodental.rs

PREDSTAVNIŠTVO :

Balkanska 33 * 11000 Beograd * Srbija * tel/fax: 011 36 200 25